


HiToP[®]-Therapietafel




Ihr kompetenter, innovativer Partner im Bereich der Physikalischen Therapie

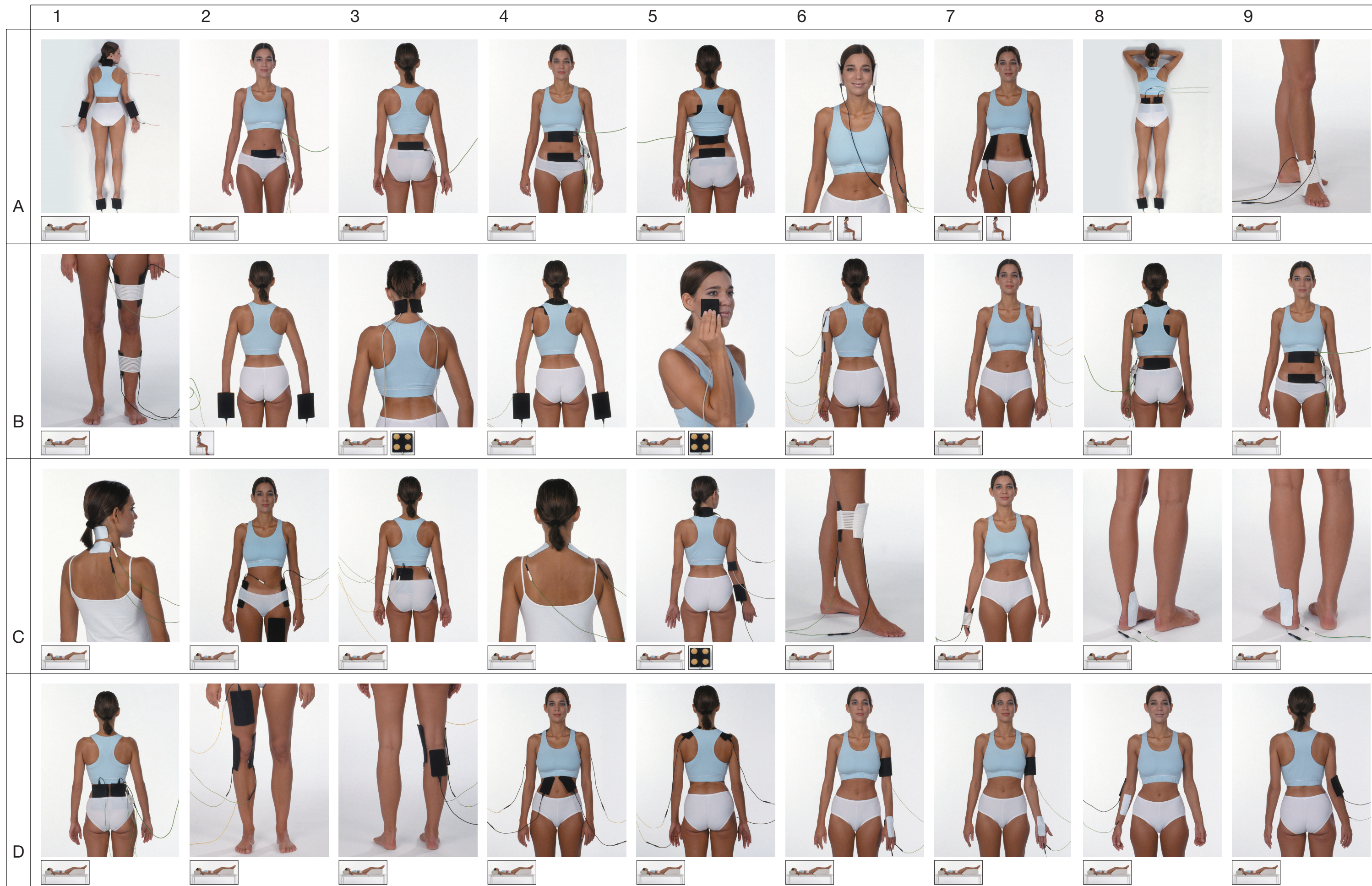

Auszug aus dem Indikationsmenü

Ganzkörperbehandlung	A1
Gynäkologie und Urologie	
Adnexitis, chronische	A2 + A3
Dysmenorrhoe	A2 + A3
Obstipation, atonische	A4 + A5
Obstipation, spastische	A4 + A5
Postoperativer Darmatonien	A4 + A5
Schmerzen durch Intrauterinpeppar	A2 + A3
Hals-Nasen-Ohren Heilkunde	
Otitis media chronica	A6
Tinnitus	A6
Innere Medizin und Angiologie	
Adipositas, Übergewicht	A7
Arterielle Verschlusskrankheiten	A1
Asthma bronchiale	D4+D5
Diabetische Angiopathien	A1
Endangiitis obliterans	A8
Hämatom im Bereich der Wade	B1
Herzbeschwerden, funktionelle	B2
Migräne (Behandlung im Intervall)	B3
Obstipation, atonische	A4+A5
Obstipation, spastische	A4+A5
RAYNAUD-Syndrom	B4
Neurologie	
Amyotrophische Lateralsklerose	A1
Atypische Gesichtsnuralgie	B5, Vierfeldelektrode
Facialis-Parese	B5, Vierfeldelektrode
Migräne (Behandlung im Intervall)	B3, Vierfeldelektrode
Polyneuropathien	A1
Schulter Schmerzen bei Hemiplegie	B6+B7
Spannungskopfschmerzen	B3, Vierfeldelektrode
Trigeminus-Neuralgie	B5, Vierfeldelektrode
Vasomotorische Kopfschmerzen	B3, Vierfeldelektrode
Orthopädie, Chirurgie, Sportmedizin	
Achillodynie, Apophysitis calcanei	C8
Arthrose der Handwurzel	C7
Arthrose der Kniegelenke	D2+D3
Arthrose der Schulter	B6+B7
Arthrose der Sprunggelenke	C9
BAKER-Cysten	C6
Bursitis praepatellaris	C6
Chondromalacia patellae	C6
Chondropathia patellae	C6
Coxarthrose, Arthrose der Hüftgelenke	C2+C3
Cystitis, chronische	A4+A5
Cystopyelitis, chronische	A4+A5
Cystopyelonephritis, chronische	A4+A5
Distorsionen im Bereich der Hüfte	C2+C3
Distorsionen, Kontusionen, Frakturen	D6+D7
Distorsion im Sprunggelenk	A9
Epicondylitis radialis (lateralis)	D8+D9
Epicondylitis radialis	D8+D9
Frakturen im Bereich der Hüfte	C2+C3
Kontusionen im Bereich der Hüfte	C2+C3
Morbus BECHTEREW	B8+B9
Muskelverspannungen, HWS u.o. BWS	C4
Osteoporose	B8+B9
Patella-Spitzen-Syndrom	C6
Periarthropathia humeroscapularis	B6+B7
Postoperativer Darmatonien	A4+A5
Radikuläre Syndrome	B8+B9
Schmerzen der Ileosakralgelenke	D1
Torticollis acutus	C1
Psychiatrie	
Angstzustände	B3, Vierfeldelektrode
Depressionen	B3, Vierfeldelektrode
Entzugssymptome bei Alkoholismus	A6
Entzugssympt. bei Drogenabhängigkeit	A6
Phobien	B3

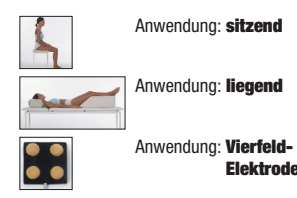

Anwendung: **sitzend**
Anwendung: **liegend**
Anwendung: **Vierfeld-Elektrode**

SimulFAM[®]i
1. Nur Stoffwechsel-Effekte und ggf. periphere Schmerzlinderung:
2. Stoffwechsel-Effekte plus Effekte der flüchtigen exzitatorischen Aktivität:
3. Blockierung zur peripheren Schmerzlinderung:

Dosierung
unterschwellig
sensibel überschwellig
Festfrequenz auswählen, so weit wie möglich sensibel überschwellig, aber immer motorisch unterschwellig

SimulFAM[®]X
1. Thromboseprophylaxe, Aktivierung der Muskelpumpe
2. Muskellockerung
3. Lipolyse
4. Vasokonstriktion zur Ödem-Prophylaxe und Ödem-Behandlung
5. Muskelaufbau, Muskelkräftigung, maximal 20s, nur mit Pausen!
6. Schmerzlinderung (auch Sympathikus „Dämpfung“, erst Vasokonstriktion, dann Vasodilatation)

Frequenz
0,3 Hz
1 Hz
3 Hz
10 Hz
20 Hz
100 Hz

gbo Medizintechnik AG
Kleiststraße 6 · 64668 Rimbach
Telefon: +49 (0) 62 53 / 808 - 0
Telefax: +49 (0) 62 53 / 808 - 245
E-Mail: info@gbo-med.de
Internet: www.gbo-med.de