



RASCH
UND VIELSEITIG
EINSETZBAR

*stabiles Frequenz-Intensitäts-Verhältnis,
wartungsfrei, ohne Wassertank*

FOKUSSIERTE STOSSWELLENTHERAPIE

PIEZOWAVE^{2T}

Die direkt fokussierte PiezoWave hat sich als Standard der modernen Stoßwellentechnologie durch höchste Qualität und flexible Anpassung an medizinische Erfordernisse durchgesetzt. Der hochauflösende Touchscreen und die Applikationstechnik ermöglichen dynamisches Arbeiten. Die wartungsfreie PiezoWave ist das Nonplusultra der aktuellen Stoßwellentechnologie. Herkömmliche ESWT-Technologien reduzieren die Stoßwellen-Frequenz bei der Nutzung höherer Intensitäten und größerer Eindringtiefe, weil sie in ihren technischen Möglichkeiten limitiert sind.

Der Hochspannungsgenerator des PiezoWave^{2T} garantiert über eine große Bandbreite ein stabiles Frequenz-/Intensitäts-Verhältnis.

Dies erweitert insbesondere die Möglichkeiten der ESWT bei dynamischen Applikationen, bei der die Therapiequelle über dem Zielgewebe bewegt wird. So kann mit einer Frequenz von bis zu 12 Hz auch bei hohen Intensitäten zügig und homogen über langstreckigen anatomischen Strukturen gearbeitet werden.

Klassische Indikationen & Anwendungsbereiche

- Kalkschulter
- Achillodynie – Tendopathie der Achillessehne
- Plantare Fasciitis
- Trochanter-Schmerzsyndrom
- Patellaspitzensyndrom
- Epicondylitis (Tennisellbogen, Golferellbogen)
- Mediales Tibia-Stress-Syndrom
- Triggerpunkt-Therapie
- Knochenmarködem
- Arthrosen
- Oberflächennahe Pseudarthrosen
- Carpaltunnelsyndrom
- Dupuytren'sche Kontraktur, Morbus Ledderhose
- Myofasciales Schmerzsyndrom



Präzision

Feine Abstufung der Eindringtiefen in 5 mm-, 10 mm- oder 20 mm-Schritten mittels Gel-Pads ermöglichen einen präzisen Therapiefokus.



Verlässlichkeit

Verlässlich, leistungsstark und stabil – eine Technologie, die Sie nicht im Stich lässt. Daher gilt unser einzigartiges Garantieverprechen von bis zu 5 Millionen Stoßwellenimpulsen. Das Gerät ist wartungsfrei.




Individualität

Jeder Patient und seine Krankheitsgeschichte sind einzigartig. Für die jeweilige Anforderung die passende Therapiequelle – für den bestmöglichen Therapieerfolg!



Effizienz

Die leistungsstärkste Technologie zur Stoßwellengenerierung: „Direct Focusing“ mit multiplen Piezo-Keramiken. Nur im Zielgewebe kommt es zur Fokusformierung. Damit ist sie die sanfteste und präzise Art der Stoßwellengenerierung.

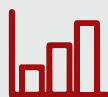

**Preis-Leistungs-Sieger,
angenehm leise**

**hohe Patientenzufriedenheit,
rasche Erfolge**

IHR VORTEIL

- Direkt fokussierte Piezo-Stoßwelle – die sanfteste und präzise Art der Stoßwellenformierung
- Stoßwelleneffekt im Fokuspunkt/Zielgewebe
- Feine Abstufung der Eindringtiefen durch Gel-Pads
- Tiefster Wirkbereich 17,5 cm (bei F10G10 Therapiequelle)
- Leise, langlebig – pro Applikator bis zu 5 Millionen Stoßwellenimpulse garantiert
- Stabiles Frequenz-/Energieflussdichte-Verhältnis – bis zu 12 Hz
- Höchste Qualität und flexible Anpassung an medizinische Erfordernisse